

リメイク設定方法
NobelProcera® Product



NobelProcera®

Product

リメイク設定方法

NobelProcera® Product

Content

•Information 03

•リメイク代替製品 05

- NobelProcera® FCZ Crown 06
- NobelProcera® FCZ Bridge 08
- NobelProcera® FCZ Implant Bridge 11
- NobelProcera® Implant Bridge Zirconia 13

•リメイク設定方法 14

•Contact support 24



リメイク設定方法 NobelProcera® Product

information

ノーベルプロセラFCZクラウン&ブリッジ製品において、ジルコニア材を変更させていただく事となりました。
2020年9月より発売開始となりましたNobelProcera® Zirconia Implant Bridge ナセラと同材料とを使用し、
10色展開へと選択肢が広がります。

ジルコニア材の変更に伴い、ノーベルプロセラFCZクラウン&ブリッジおよび、ノーベルプロセラFCZインプラント・ブリッジ
は、2020年12月30日(水)18:00までのオーダーを持ちまして製造終了することとなりました。
ご迷惑をおかけいたしますが、何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

詳細等、ご不明点がございましたらテクニカルサポートまでお問い合わせいただければ幸いです



リメイク設定方法 NobelProcera® Product

information

切替日程：2020年12月31日（木）8:00からのオーダーより

対象製品：ノーベルプロセラ・クラウン・ナセラ、ノーベルプロセラ・ブリッジ・ナセラ（天然歯用）

（受付け時間、アップグレード手順などの詳細はユーザーサイト（<http://www.nbj-pts.biz/lab1.11/>）を参照ください）

(2020年12月30日 18:00 受注分まで)			(2020年12月31日 8:00 受注分より)		
製品名	シェード	ブロックタイプ	製品名	シェード	ブロックタイプ
ノーベルプロセラ FCZクラウン	6色	マルチレイヤー	ノーベルプロセラ クラウン ナセラ	10色	シングルレイヤー
ノーベルプロセラ FCZブリッジ (2-5unit)	6色	マルチレイヤー	ノーベルプロセラ ブリッジ ナセラ (2-5unit)	10色	シングルレイヤー

製品切り替えの為、2020年12月30日18:00から12月31日8:00までの間はオーダーが出来ません。
12月31日8:00より、ノーベルプロセラ・クラウン ナセラでオーダーを行ってください。

リメイク代替製品



リメイク設定方法 NobelProcera® Product

製造終了製品

2020年12月30日18:00オーダー分まで受注受付*



NobelProcera®
FCZ Crown



Product	NobelProcera® FCZ Crown
Material	HT ML Zirconia (6シェード)
Type	▶ フルカントウア ▶ フレーム
Delivery days	3 営業日
Production Availability	幕張製造 (日本)
Replacement Product	NobelProcera® Zirconia Crown (Nacera)

重要

*12月30日(水) 18:00 までのオーダー (幕張・プロダクション・センターにデータ到達分) まで製造

リメイク設定方法 NobelProcera® Product

製造終了製品

2020年12月30日18:00オーダー分まで受注受付*



NobelProcera® FCZ (HTML) Crown

Removed date : Dec 30th, 2020



代替製品

NobelProcera® Zirconia Crown (Nacera)

Launch date : Dec 31st, 2020



リメイク設定方法 NobelProcera® Product

製造終了製品

2020年12月30日18:00オーダー分まで受注受付*



NobelProcera®
FCZ Bridge



Product	NobelProcera® FCZ Bridge
Material	HT ML Zirconia (6シェード)
Type	▶ フルカントウア ▶ フレーム
Delivery days	4 営業日
Production Availability	幕張製造 (日本)
Replacement Product	NobelProcera® Zirconia Bridge (Nacera)

重要

*12月30日(水) 18:00 までのオーダー (幕張・プロダクション・センターにデータ到達分) まで製造

リメイク設定方法 NobelProcera® Product

製造終了製品

2020年12月31日製造終了

2020年12月31日オーダー分まで受注受付*



NobelProcera® FCZ (HTML) Bridge

Removed date : Dec 30th, 2020



代替製品

NobelProcera® Zirconia Bridge (Nacera)

Launch date : Dec 31st, 2020



リメイク設定方法 NobelProcera® Product

information

ノーベルプロセラFCZクラウン&ブリッジ製品は、ナセラ・パール・シェードへと材料を変更させていただきます。

2020年12月31日(木)8:00以降のオーダーより、ノーベルプロセラFCZクラウン & ブリッジの代替製品は、ノーベルプロセラ・ジルコニア クラウン & ブリッジ ナセラでオーダーを行ってください。

ノーベルプロセラ・ジルコニア クラウン & ブリッジ ナセラは、1月18日より国内(幕張プロダクションセンター)で製造が開始されます。

2020年12月31日(木)8:00のオーダーから、1月16日(土)8:00までのオーダーに関しては、マウワ・プロダクション・センター(米国)での製造となりますので、ご了承ください。

詳細等、ご不明点がございましたらテクニカルサポートまでお問い合わせください。



リメイク設定方法 NobelProcera® Product

製造終了製品

2020年12月31日製造終了

2020年12月31日オーダー分まで受注受付*



NobelProcera®
FCZ Implant Bridge



Product	NobelProcera® FCZ Implant Bridge
Bridge span	2-5 unit
Material	HT ML Zirconia (6シェード)
Type	▶ フルカントウア ▶ フレーム (スクリュー付 / CCの場合、患者用メタルアダプター付)
Delivery days	8 営業日
Production Availability	Mahwah製造 (米国)
Replacement Product	NobelProcera® Zirconia Implant Bridge (Nacera)

*12月31日(木) 23:59 までのオーダー (マウワ・プロダクション・センターにデータ到達分) をもって製造終了

リメイク設定方法 NobelProcera® Product

製造終了製品

2020年12月31日製造終了

2020年12月31日オーダー分まで受注受付*



NobelProcera® FCZ (HTML) Implant Bridge

Removed date : Dec 31st, 2020



Remake

代替製品

NobelProcera® Zirconia Implant Bridge (Nacera)

Launch date : Sep 1st, 2020



*12月31日(金) 23:59 までのオーダー (米国・プロダクション・センターにデータ到達分) をもって製造終了

* NobelProcera® Implant Bridge Zirconiaへのリメイクも可能

リメイク設定方法 NobelProcera® Product

製造終了製品

NobelProcera Zr Implant Bridge Naceraが、幕張での製造を開始次第、販売終了
(2021年中頃予定)

NobelProcera® Implant Bridge Zirconia



Product	NobelProcera® Implant Bridge Zirconia
Bridge span	2-14 units
Material	Zirconia (4 Shade)
Type	<ul style="list-style-type: none">➤ インプラントレベル (NobelBiocare® Implant)*➤ アバットメントレベル (Multi-unit Abutment) (スクリュー付)
Delivery days	4 営業日
Production Availability	幕張製作 (日本)
Replacement Product	NobelProcera® Zirconia Implant Bridge (Nacera)

リメイク設定方法

幕張・プロダクション・センターで製造される製品



リメイク設定方法 NobelProcera® Product

リメイクコード:
ASR2512

NobelProcera® FCZ Crown & Bridge remake

①リメイクオーダーの作成

DTX Studio Lab ソフトウェアから、新規スキャンおよび、デザインを完成させ、オーダーへ進みます。

ケースセットアップで【Nacera】、
【Zirconia】を選択

Scan & Designを完成させ【オーダー】を行います。

DTX Studio Lab

NobelProcera Software Remake Order - NobelBiocare

Place your order
Order or export your designed products.
START

Case design

Model scan

Prescription form

Details

Activity

Restoration details

Production method
Nobel Biocare production

Material
Nacera®

Shade
A3

Design flow
Start from library

Back to overview

リメイク設定方法 NobelProcera® Product

NobelProcera® FCZ Crown & Bridge remake

リメイクコード:
ASR2512

②リメイクコードの入力

オーダー画面から、【Invoice Reference】および【Add a production remark】に必要事項を入力します。
(記入例参照)

記入例：

【Invoice Reference】

- **ASR2512**
(入力欄の左端にリメイクコードを入力してください)

【Remark】

- **Remake Order** もしくは **リメイク オーダー** と記載
- **オリジナルファイル名** (元のファイル名を入力)
(プリフィックスとオーダー番号の組み合わせ)

Order for NobelProcera Software Remake Order
Patient of NobelBiocare

Issued by: _____ Invoice Reference: _____ 直接入力します

Ship to: _____
Marketing: Grand Central Tower 2-16-4 Konan B1
1400031 TOKYO Japan

Add a production remark クリックしウィンドウを表示し入力します

Order list (1) article

1500H 26	NobelProcera HT Multi Layered FCZ Crown Allight	production	1x	JPY 0.00	---
	Article number 73446				
				Total price	JPY 0.00

Order now >

Invoice Reference

ASR2512 (必ず左端に【ASR2512】とリメイクコードを入力してください)

Remark

Remake Order
ABCD234 (元のファイル名が【ABCD234】の場合の入力例)

リメイク設定方法 NobelProcera® Product

NobelProcera® FCZ Crown & Bridge remake

③ オーダー

【必要事項を入力後、画面下の【Order】を行います。

The screenshot shows the DTX Studio Lab interface. The main window is titled 'NobelProcera Software Remake Order - NobelBiocare'. On the left, there is a sidebar with a list of cases. The main area shows a detailed view of an order for 'Order GIQW73'. A callout box highlights the 'Order GIQW73' label and the 'Nobel Biocare production items' section, which includes the item name 'NobelProcera® Zr Implant Bridge 3uni...', the status 'In production', and the article number '83281'. The callout also contains the text '新しいオーダーのファイルネーム' (New order file name).

リメイク設定方法

マウワ・プロダクション・センターで製造される製品



リメイク設定方法 NobelProcera® Product

NobelProcera® FCZ Implant Bridge remake

①リメイクオーダーの作成

DTX Studio Lab ソフトウェアから、新規スキャンおよび、デザインを完成させ、オーダーへ進みます。

ケースセットアップで【Nacera】、
【Zirconia】を選択

Restoration details

Production method

Nobel Biocare production

Material

Nacera®

Shade

A3

Design flow

Start from library

[Back to overview](#)

Scan & Designを完成させ【オーダー】を行います。

DTX Studio Lab

NobelProcera Software Remake Order - NobelBiocare

Place your order
Order or export your designed products.
START

Case design

Model scan

Prescription form

Details Activity

Restoration details

Tooth 26 Full-arch crown HT ML Zirconia Allight

Patient Case ID
Overdate 14 OCT 2022

Requested by NobelBiocare

Place your order
Order or export your designed products.
START



リメイク設定方法 NobelProcera® Product

NobelProcera® FCZ Implant Bridge remake

② オーダーの実行
オーダーを行います。

The screenshot shows a web application window titled "Create order" with a "Cancel" button in the top right. The main heading is "Order for NobelProcera Software Remake Order" and the sub-heading is "Patient of NobelBiocare".

Fields for "Issued by" and "Invoice Reference" are present. The "Ship to" field contains the address: "Marketing, Grand Central Tower 2-16-4 Konan B/F, 1400001 TOKYO, Japan". A link "Add a production remark" is visible next to it.

The "Order list (1) article" section contains a table with the following data:

TOOTH 26	NobelProcera HT Multi Layered FCZ Crown ALight	production	1x	JPY 0.00	...
	Article number 73446				
				Total price	JPY 0.00

An "Order now" button with a right-pointing arrow is located at the bottom of the window.





③ Procera technical supportへ連絡
新しいファイルネームと、元のファイルネームを伝えてください。



元のファイル名と新しいファイル名を伝えてください。

リメイク設定一覧

NobelProcera Production Center

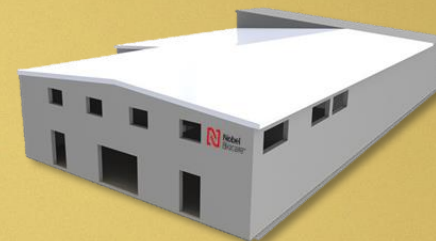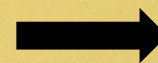

リメイク設定方法 NobelProcera® Product

NobelProcera® Remake Order 一覧

ASR246 (幕張製造)	<ul style="list-style-type: none"> ・ NobelProceraソフトウェアからオーダーした製品(2019年6月以前のオーダー) ・ 他のDTX Studio ライセンスからのオーダーした製品
プロセラ・テクニカル・サポートへ連絡 (Mahwah製造)	<ul style="list-style-type: none"> ・ Proceraマウア工場で製造された製品 (・ IBO* ・ FCZ Implant Bridge ・ Abutment Titanium(External)*) * NobelProceraソフトウェアでオーダーした製品に限る ・ 他のDTX Studio ライセンスからのオーダーした上記製品
ASR2512 (幕張製造)	<ul style="list-style-type: none"> ・ NobelProcera FCZ Crown & Bridgeの再製作
通常リメイク	<ul style="list-style-type: none"> ・ DTX Studio (NobelDesign含む)からオーダーした製品



DTX Studio Lab ソフトウェアは、当該ライセンスからのオーダー分のみリメイクオーダーが作成できます。次の場合は、新規ケース作成からリメイクオーダーを製作してください。

- ・ 他のDTX Studio Lab ライセンスからのオーダー
- ・ Proceraマウア工場で製造される製品につきましては、プロセラ・テクニカル・サポートへご連絡ください。
(・ IBO製品 ・ FCZ Implant Bridge ・ Abutment Titanium(External))

リメイク設定方法 NobelProcera® Product

NobelProcera® FCZ Crown & Bridge remake

リメイクに関する詳細は、ユーザーサイト (<http://www.nbj-pts.biz/lab1.11/>)、リメイクオーダーマニュアルを参照ください

The collage displays five pages from the 'NobelProcera Software / Remake Order Manual'. The pages are:

- Top Left:** 'NobelProceraソフトウェア/リメイクオーダー マニュアル' (NobelProcera Software / Remake Order Manual) - Introduction and overview.
- Top Middle:** 'リメイクオーダーの準備' (Remake Order Preparation) - Details on preparing the remake order.
- Top Right:** 'リメイクオーダーの作成' (Remake Order Creation) - Step-by-step guide to creating the remake order in the software.
- Middle Left:** 'リメイクオーダーの入力' (Remake Order Input) - Instructions on how to input the remake order details.
- Middle Right:** 'マウア(米国)製造におけるNobelProcera製品のリメイクオーダー方法' (Remake Order Method for NobelProcera Products Manufactured in the USA) - Specific instructions for the US manufacturing process.

Each page includes the Nobel Biocare logo, a title, and detailed text with images of dental models and software interface elements. A red banner at the bottom of each page contains contact information for Nobel Biocare Japan K.K.

Contact Support



ノーベルプロセラ製品および、DTX スタジオに関してご不明点などございましたら、
ノーベル・バイオケア・ジャパン株式会社
プロセラ・テクニカルサポートまでご連絡ください。

ノーベル・バイオケア・ジャパン株式会社
プロセラ・テクニカルサポート
TEL: 0120-432-118
営業時間: 月～金 10:00時-18:30時
(土・日・祝日は除く)



Nobel Procera®

Product